

# 1. 歩行車とシルバーカーの違い


## 歩行車



### 歩行機能をサポートする福祉用具!

- ・ 自立歩行が困難な方
- ・ 歩行訓練
- ・ 歩行の安定化を助け、歩行時の姿勢を保持
- ・ 足腰への負担を軽減

- ・ ハンドルが使用者の身体を囲む形状

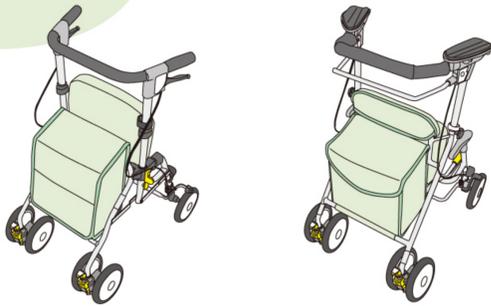

## シルバーカー



### 買い物や外出をサポート!

- ・ 自立歩行が可能な方
- ・ 杖ではバランスを崩しやすい人
- ・ 荷物の運搬が楽になる
- ・ 歩行途中で休憩を取りやすい

- ・ ハンドルの形は様々あります。



# 2. 使い方、高さの選び方

お勧めする「押しかた」「高さの基準」についてですが、実際に使用されるお客様一人一人に適切な製品が違うため、使用に適しているかどうか不明な場合、必要に応じて専門家(福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等)に相談し、購入されることをお勧めしております。

# 3. おすすめの商品

## <歩行車>

「シンフォニーSP」を推しております。この機種を基準として、スリムタイプ・BOXタイプ・お買い物に便利なタイプなど幅広く揃っております。

## <シルバーカー>

弊社では、目的に応じて便利な形状の製品を作っており、カテゴリー別での「オススメ」が下記の商品になります。お客様の「これが欲しかった」と感じていただける製品をとり揃えております。

コンパクトタイプ: 「サニーウォーカーAW-RB」

ミドルタイプ: 「アルト」

ボックスタイプ(スタンダード): 「デュオ ST」

メンズタイプ: 「テノール EVO」

アルミタイプ: 「ハーモニーALII」

B チェックブルー

格子紺

花柄 BK

CL ブラウン

約 78.5  
〜  
88cm

約 56cm

約 50cm

価格 37,400円 (税抜 34,000円)

月額レンタル料

ご利用者負担額 (1割)

ご利用者負担額 (2割)

折りたたみレバーを  
上げるだけで簡単に  
たためます。

歩行車 シンフォニー SP

材質	本体部 / アルミ (一部スチール) (粉体塗装) タイヤ / EVA	
バッグ材質	ポリエステル	
使用時サイズ	約 H78.5 ~ 88 × W50 × D56 cm	
収納時サイズ	約 H86.5 × W50 × D28.5 cm	
ハンドル高	約 78.5 ~ 88 cm	
高さ調節	4段階 (ピッチサイズ 約 3 cm)	
座面高	約 41 cm	
座面サイズ	約 W34.5 × D27 cm	
タイヤ直径	前輪	後輪 約 14.5 cm
バッグ載荷重	5 kg	
バッグサイズ	約 H26 × W30.5 × D14.5 cm (外寸)	
重量	約 5.9 kg	
最大使用者体重	100 kg	
入数	2(1)	
JANコード	花柄 BK /4945528	178588
	B チェックブルー /4945528	178571
	CL ブラウン /4945528	178489
	格子紺 /4945528	178571
TAISコード	00576-000014	

片方だけのブレーキ操作で両後輪を制御できるだけでなく、ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム、レバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。



横幅が小さく、幅を取らない設計。狭い場所でも小回りがきき、扱いやすいです。  
横幅約 50 cm で歩行スペースはしっかり確保。



座面は上げ下げ  
するだけのワン  
タッチ操作。



使いやすいバッグ付きで  
買い物に便利です。



●仕様および価格は、製品開発、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。  
●商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。  
●当社製品はPL保険に加入しております。